

オプション さらに快適にさらに優しく

カラー バリエーション



ブルー



ピンク



ライトグリーン

実際の色と多少異なる
場合がございます。

移動もラクラク 便利なワンタッチキャスター

ボタン一つでキャスターの出し入れが可能、
診察室や手術室での移動も楽に行えます。



高さメモリー機能で簡単・便利

患者さんに合わせ3種類の高さを任意にメモリーでき、
ワンタッチで上昇するので、フットスイッチを押し続ける
必要がありません


■仕様

●耳鼻咽喉科治療椅子 いやし

形式	EFTC01	EFTC02
昇降	電動 座面最低高 450mm 座面最高高 750mm	
左右回転	電動(手動可) 回転範囲320°	手動 回転範囲320°
寝起	電動 寝起角度 95° (前傾5° 後傾90°)	
設置寸法	本体:直径600mm(円形)/フットスイッチ:210×185mm	
重量	125kg (+)3kg	122kg (+)3kg
オプション電動キャスター	(+)3kg	(+)3kg
定格電圧	交流100V 50/60Hz	
消費電流	5A	
電撃に対する保護の形式	クラス1	

- 販売名 耳鼻咽喉科治療椅子 いやし
- クラス分類 一般医療機器
- 承認 製造 1381X00137156001
- UMDNコード 16437000

■寸法図

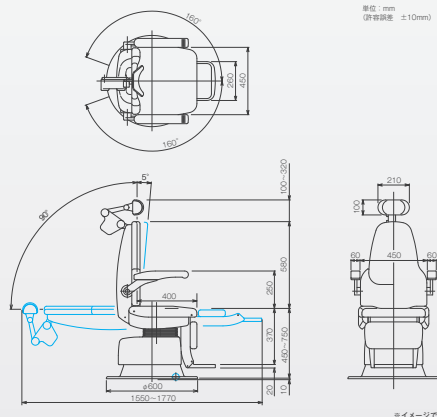

※イメージです

実物と印刷物では色の出方が異なります。デザイン・仕様は予告なく変更されることがありますのでご了承ください。 052509

第一医科株式会社

本社 〒113-0033 東京都文京区本郷2-27-16 Tel 03-3814-0111 Fax 03-3814-0135
大阪営業所 〒534-0027 大阪市都島区中野町4-8-10 Tel 06-6351-0111 Fax 06-6351-0106
名古屋営業所 〒466-0064 名古屋市中区鶴舞1-2-47 Tel 052-856-0191 Fax 052-856-0192



DAIICHI MEDICAL CO.,LTD.

第一医科 オフィシャルホームページ www.first-med.co.jp

ENTFirst

耳鼻咽喉科

治療椅子 いやし

診察室に静謐な趣をもたらす、
上質な色彩と端正なフォルム。
確かな操作性と洗練された機能が、
日々の診療を穏やかに、
そして確実に支えます。



第一医科株式会社

患者さんへの優しさを第一に…

トータルデザインへのこだわりが息づく、優美なラウンドフォルムと安らぎをもたらす色彩。
すべての患者さんを優しく包み込む先進の「耳鼻咽喉科治療椅子」



優れた
操作性


高水準の
機能性



耳鼻咽喉科ユニットに接続することで、フットスイッチを使用しなくても上下左右回転などの操作が可能です。

● フットスイッチ

全体をゴムでカバーした設計により、清掃が容易です。シンプルで直感的な操作性は、30年以上にわたり多くの現場で愛され続けてきました。耐久性と使いやすさを兼ね備えたフットスイッチが、快適なワークフローを支えます。

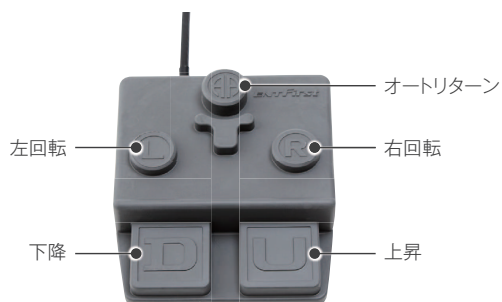

● レザー性能

レザーは防汚・伸縮・耐薬品・耐移行・防災加工を施してあるので長期間安心してご使用いただけます。
※オプションレザーでは、仕様が異なる場合があります。



診療をサポートするための機能

● 回転ブレーキ解除ボタン

回転位置の調整に便利な肘置き下の回転ブレーキ解除ボタンです。押している間は回転ブレーキが解除され、手で椅子を回転できます。



● ヘッドレストワンタッチ位置調整

ヘッドレストは裏側のボタンを押すと固定が解除し、位置調整ができます。スムーズな診療を可能にします。




● 新形状の両側面スイッチ

背面側に寝起、昇降、回転ブレーキ、高さメモリー（オプション）のスイッチを集中配置。指先の感覚で機能がわかる「触感フィルムスイッチ」を採用。誤動作防止のための無効化スイッチも座面下にあるので、多様な診療状況に対応できる安心設計です。



● 安全を考慮した設計

ステップを可動式にし、万一足を挟んでも安全です。診療スタイル、患者さんの状態にあわせて、ステップを収納した状態でも使用できるようにしました。

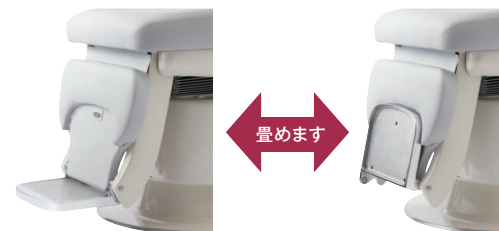

● 安心して座り、安心して立てる

診療時には、450～750mmの幅広い昇降域により、体格や状況に応じて最適な高さを実現します。
特に座面を最低位（450mm）に設定すれば、どなたでも安全に着座・立位が可能です。

