



ネブライザー 華 FN-N3000S 3人用ボディ寸法

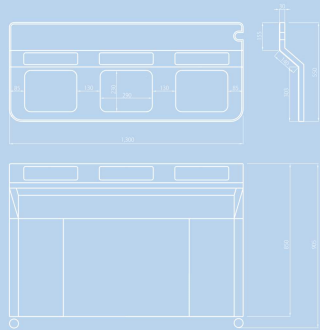

■ネブライザー 華 FN-N****S

エア供給	オイルフリーコンプレッサー(2~3人用)X1個 (4~5人用)X2個
	ステンレス製タンク 1個
	オートドレインシステム 1個
	高性能中空系フィルター 1個
エア圧力	0.15~0.3MPa 自動運転
吐出圧力	0~0.2MPa可変 出荷時0.05MPaに設定
タイマー	40秒~10分
本体材質	・ボディ(スチール・粉体塗装)・天板(人工大理石)
大型樹脂ネブ球材質	・樹脂ネブ球(ポリシリコン・シリコン・ガラス)
寸法	2人用: W900×D550×H905mm 3人用: W1300×D550×H905mm 4人用: W1700×D550×H905mm 5人用: W2100×D550×H905mm
重量	2人用: 88kg 3人用: 103kg 4人用: 118kg 5人用: 133kg
入力電源	交流100V 50/60HZ
消費電流	(2~3人用)4A・(4~5人用)8A
電撃に対する保護の形式	クラスⅠ
電撃に対する保護の程度による装着部の分類	BF型装着部を有する機器
承認・認証・届出	13B1X00137143000

消耗品 ネブライザー

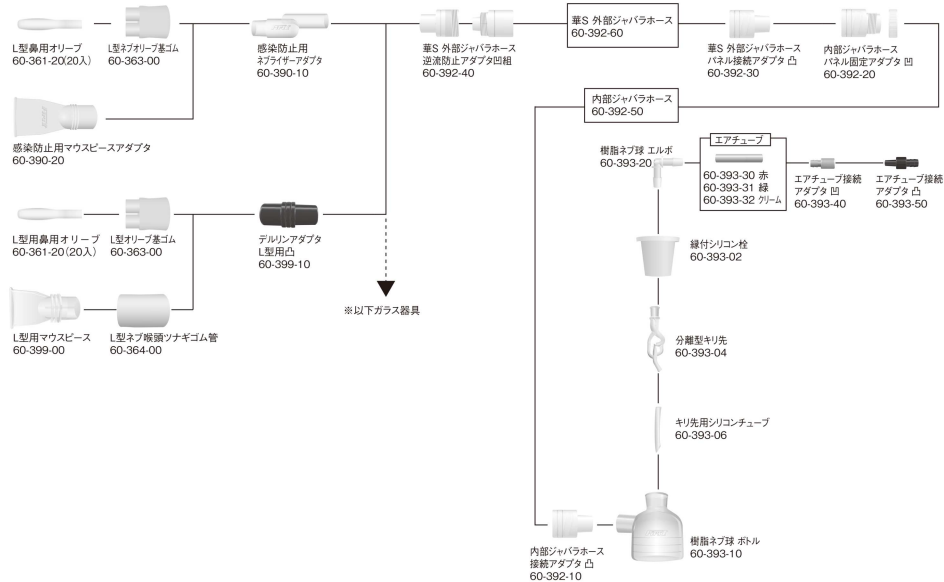

実物と印刷物では色の出方が異なります。デザイン・仕様は予告なく変更されることがありますのでご了承ください。 002201

第一医科株式会社

本社 〒113-0033 東京都文京区本郷2-27-16 Tel 03-3814-0111 Fax 03-3814-0135
大阪営業所 〒534-0027 大阪府都島区中野町4-8-10 Tel 06-6351-0111 Fax 06-6351-0106
名古屋営業所 〒466-0064 名古屋市中区鶴舞1-2-47 Tel 052-856-0191 Fax 052-856-0192

DAIICHI MEDICAL CO.,LTD.

第一医科 オフィシャルホームページ www.first-med.co.jp



診察の空間を華やかに彩る。

ファースト ネブライザー
hana
華

第一医科株式会社

安心と優しさを。 華のような 安らぎを込めて。

患者様の治療の不安を減らし、より快適な診察を考えて、
豊富なカラーバリエーションで、
使う人の心をカラフルにするネブライザーに生まれ変わりました。

医療空間に馴染むカラーと、優しいデザインが、
患者様の心を和らげます。

患者様にも看護師さんにも使いやすい
ネブライザーユニット「hana〜華」は
医療空間も人の心もカラフルにしながら、
皆様の診察をしっかりとサポートします。

ファーストネブライザー
hana
華



使い続ける、すべての人のために

多彩な機能がさらに進化

- POINT 1 デザイン性の向上が、
診療空間を華やかに。
- POINT 2 多彩な機能が作業効率
を迅速に。
- POINT 3 メンテナンスの向上が
快適さと安全性を生む。

Design デザイン
さらに華やかに、美しく。患者様の安らぎを形に。

スイッチパネル

ユニットと同様のカラーバリエーションが選択可能。
より使いやすい角度へ改良しました。

パネルを組み合わせる事で30通りのカラーバリエーションが選べます。



ブルー



ピンク

メンテナンス扉

メンテナンス扉には診療空間の雰囲気に合わせて選べる、ホワイトの他4色のカラーバリエーションをご用意いたしました。



ブルー



ピンク



イエロー




グリーン

Function 機能性
確かな機能をより進化させた、最新の医療システム。

理想的な霧と使いやすさを併せ持つ大型樹脂ネブ球。

職人ワザのガラス製キリ先と扱いやすい樹脂ボトルを融合させました。
全てのパーツが耐熱性を備えており、まるごとオートクレーブ可能です。

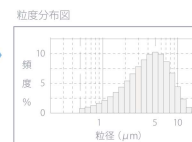

噴霧能力を追求し理想的な霧を実現しました。



診察時間を優しく、楽しく。

患者さんの目に楽しい、砂時計のアニメーションです。
座っているだけの時間を少しでも楽しい時間に出来ればと考えた機能です。



Maintenance メンテナンス
劇的なメンテナンスの向上が、より確実に迅速な作業効率を実現させます。

メンテナンス扉



アクセスしやすい位置に設置されたメンテナンス扉により、抗菌フィルター交換などが容易にできるようになりました。

大型樹脂ネブ球設置スペース



簡単に置台を外せて内部清掃も楽に出来ます。