




■E.N.T.ユニット「ステラ FU-STE」

スプレー装置	綿巻シリコン管 (抗菌)・フリージョイント式 (直 3本・曲 1本) (オプション: ホースレス)	4本 (1本~4本)
吸引装置	オイルフリー吸引モーター (床置き可能) 綿巻シリコン管 (抗菌)・滑車式 (オプション: 外側引掛け式) 吸引瓶 硬質ガラス 3リットル (オプション: 吸引物自動排出装置 : ディスポーザブルタイプ)	1個 1個 1個
通気装置	押しボタン式	1
エア供給	オイルフリーコンプレッサー (床置き可能) ステンレス製タンク オートドレインシステム 高性能中空糸フィルター	1個 1個 1個 1個
喉頭鏡ヒータ	熱風送風式 (サーモスタット&温度ヒューズ付)	1個
照明灯装置 (オプション)	熱線吸収ガラス使用・ダブルアーム式 ボール49φ (オプション: ツインボール)	1本
本体材質	ボディ (スチール・粉体塗装) 天板 (人工大理石)	
本体寸法	W1000mm × D680mm × H790mm (H2500mm 照明灯装着最大値)	
重量	120Kg (照明灯装着時)	
入力電源	交流100V 50/60Hz	
消費電流	15A	
電撃に対する保護の形式	クラスI	
電撃に対する保護の程度による装着部の分類	BF形装着部を有する機器	

■販売名: ステラ FU-STE
■クラス分類: 管理医療機器

■承認・認証・届出: 21900BZX00905000
■JMDNコード: 11585000

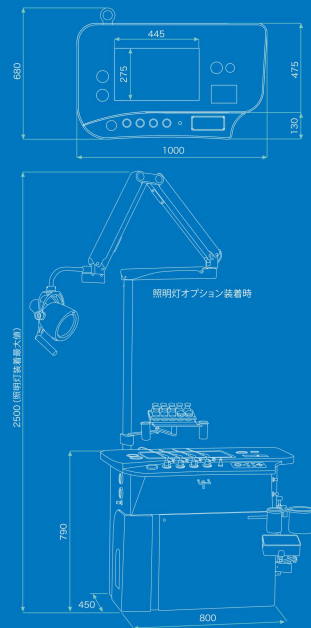

笑顔とともにある、健やかな診察空間へ。

ファーストENTユニット
ステラ
Stella



実物と印刷物では色の出方が異なります。デザイン・仕様は予告なく変更されることがありますのでご了承ください。 0000000

第一医科株式会社

本社 〒113-0033 東京都文京区本郷2-27-16 Tel 03-3814-0111 Fax 03-3814-0135
大阪営業所 〒534-0027 大阪府都島区中野町4-8-10 Tel 06-6351-0111 Fax 06-6351-0106
名古屋営業所 〒466-0064 名古屋市中区和区鶴舞1-2-47 Tel 052-856-0191 Fax 052-856-0192

DAIICHI MEDICAL CO.,LTD.

第一医科 オフィシャルホームページ www.first-med.co.jp



第一医科株式会社

安心と信頼を 積み重ねてきた かたち。

確実さと安全性が問われる医療の
現場だからこそ、誰にもやさしく開かれた
快適な場であってほしい…

ファーストのENTユニットは、医療現場に
立った視点から、長年マイナーチェンジを重ね、
多くの診察をサポートしてきました。

シンプルでコンパクトな「ステラ」のボディには、
ドクターと患者様のあいだの信頼、そして、
耳鼻科に関わるすべて人の快適さを診療ユニットの
立場から支えたいという願いが込められています。

診察をやさしく導く ENTユニット ステラ

for
Smile
Life

for
Reliable
Medical
Examination.

Stella
is
Gentle
Partner.



SYSTEM PANEL:

3Colors

Clear Blue/Clear Pink/White



ホワイト

Colors

使う人と見る人を安心させる、色の力

ユニットが彩る診察空間の雰囲気・印象・気持ち…

快適な環境づくりのなかでも「色」に注目し、製品のカラーバリエーションをご用意いたしました。塗装方法もこだわり、人だけでなく環境にも優しいユニットです。

※粉体塗装

Powder Coating

表面の塗装には、粉状の塗料を静電気力で付着させ焼き付けて硬化させる方法を採用しています。溶剤塗料に含まれるような有害物質が使われていないため、人体や環境に優しい塗装です。

SWING PANEL:5Colors

Blue/Pink/Yellow/Green/White




ホワイト

選べる、カラーバリエーション


Color Variation

システムパネル SYSTEM PANEL

システムパネルは基本のホワイト以外にもオプションで、ハーフクリア素材を使った2色から選べます。

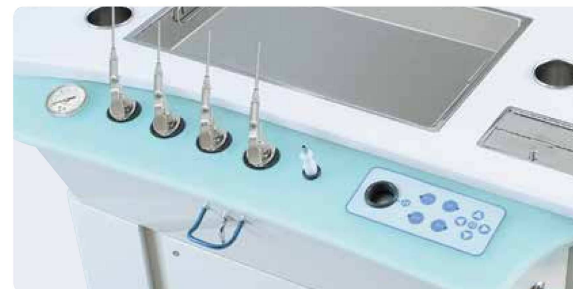

クリアブルー

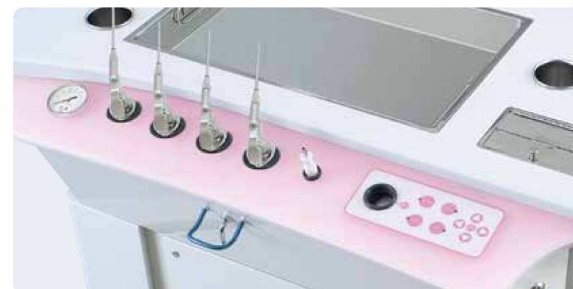

クリアピンク

スイングパネル SWING PANEL

ユニットのスイングパネルには診察空間の雰囲気に合わせて選べる、5色のカラーバリエーションをご用意しました。



ブルー



ピンク




イエロー



グリーン

Function & Design

美しいデザインと確かな機能の結集
基本機能はそのままに、伝統に培われた使いやすさに『流れ』をイメージしたシャープなデザインをプラスして、さまざまな診療スタイルをサポートする形に進化しました。

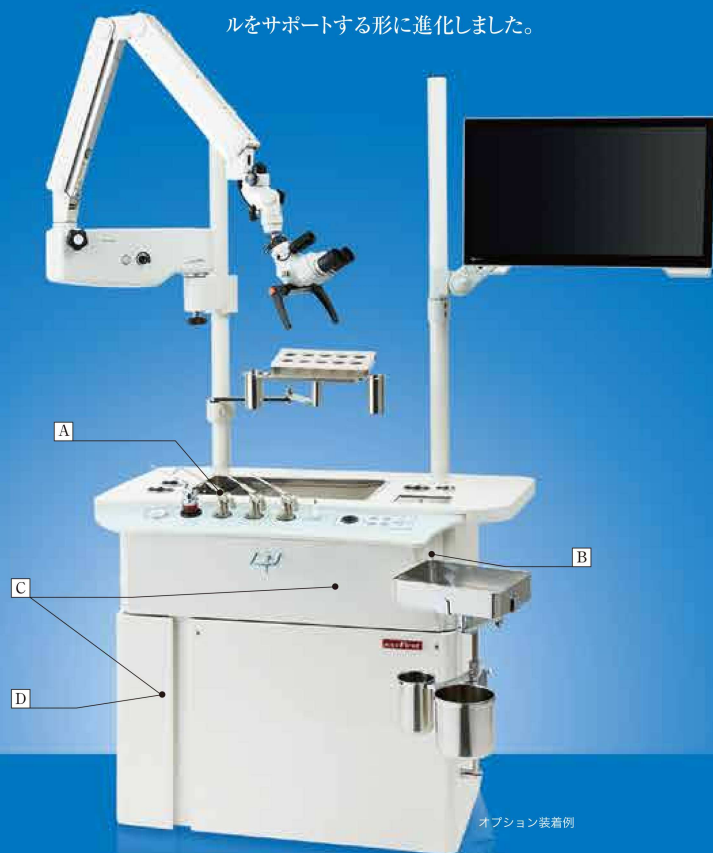

吸引物自動排出装置



ホースレススプレー



吸引：滑車式／外側引掛け式

充実した、最新の機能がサポート Versatile Function

A オートクレーブ滅菌対応スプレー

患者に接触するノズルアッセンブリが1/4回転ではずれスピーディーに交換できます。スプレーカゴとワンタッチで脱着が可能です。



B 微調節可能通気ボリューム

より繊細により広範囲に。精度の高い調整が可能なレギュレーターを採用いたしました。
信頼性の高さが日々の診療をサポートいたします。



メンテナンス性の向上 Improvement of the Maintenance

診療を行うドクターはもちろん、それを支えるスタッフや、機器をメンテナンスする人にも『優しさ』を追加し、より確実に迅速に交換等を行える部品レイアウトを実現しました。

C エアフィルター

高性能中空空気フィルターを使用して、空気をろ過しています。

- ・供給エア用(ろ過精度 $0.003\mu\text{m}$)
- ・吸引排気用(ろ過精度 $0.01\mu\text{m}$)

D 取り出しやすい吸引瓶

毎日使用する場所だから、その使い心地を第一に気を配りました。開閉しやすく、掴みやすいデザイン。大きく広がり内部の確認がしやすくなった窓。開閉することそれ自体が楽しい、そんな扉を目指しました。

